



PROCEDURA DI ATTIVAZIONE - WORKAIR


1. Collegare WorkAir al PC tramite porta USB (il pulsante dell'elettronica di WorkAir lampeggerà di arancione e vibrerà, segno del fatto che il dispositivo non è ancora stato sbloccato)
2. Entrare nel sito www.dairlab.com
3. In fondo alla pagina, a destra, cliccare su "WorkAir Activation"

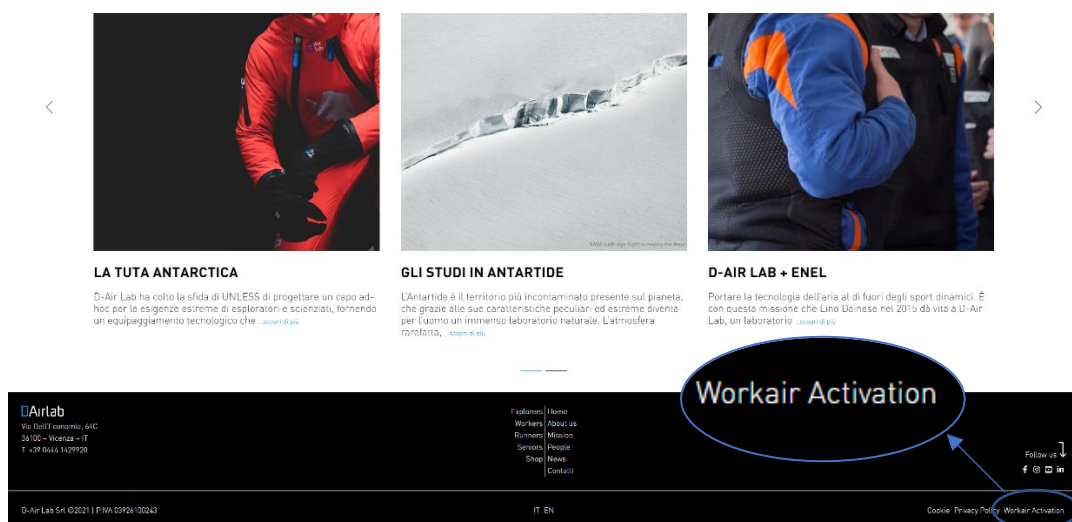


4. Si aprirà la pagina di attivazione di WorkAir: cliccare su "Connetti WorkAir"
5. Apparirà una finestrella in alto a sinistra: selezionare il dispositivo USB a cui connettersi ("STM32 Virtual ComPort") e cliccare su "Connetti"

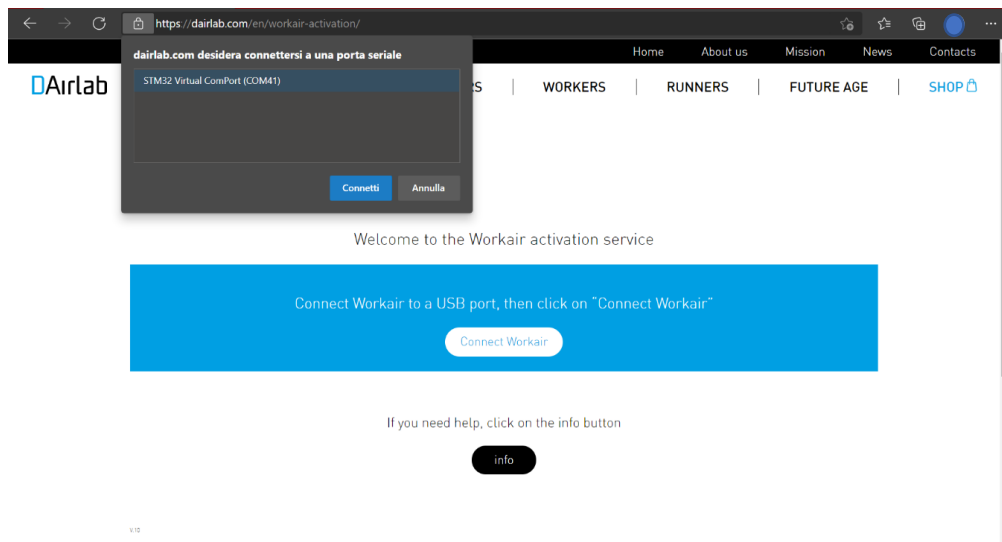

6. Si aprirà una pagina con una scritta in verde dalla quale risulterà che il WorkAir è connesso al PC
7. Cliccare su “Click here” per ricevere il Codice di Attivazione; se si è già in possesso del Codice, inserirlo nell’apposito riquadro e cliccare su “Activate”.

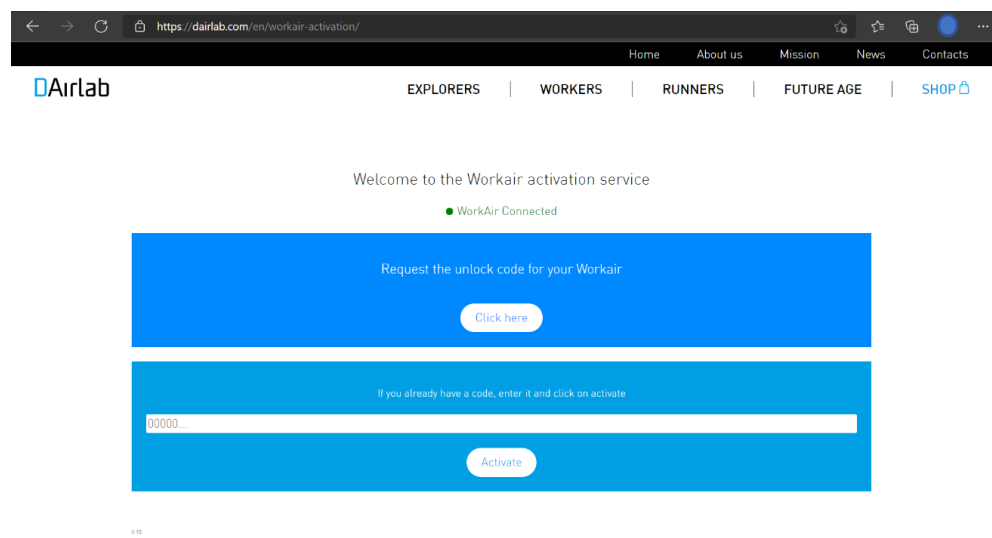

8. Se non si ha a disposizione il Codice di Attivazione, dopo aver cliccato su “Click here” comparirà un riquadro da compilare con i propri dati.
9. Cliccare poi su “get serial number” e “get DairlabID”, i cui campi verranno automaticamente compilati.

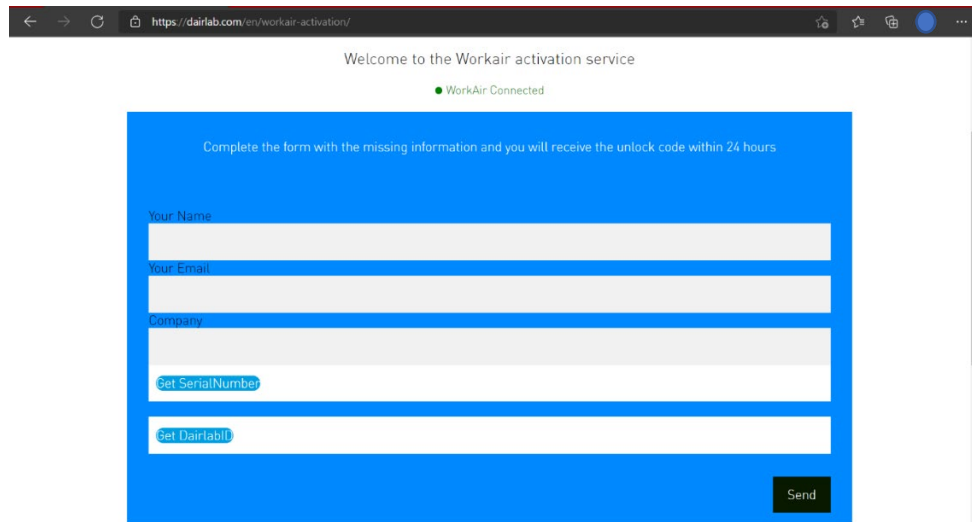


A screenshot of a web browser showing the Workair activation service page. The URL is <https://dairlab.com/en/workair-activation/>. The page title is "Welcome to the Workair activation service" and it shows a "WorkAir Connected" status. The main content is a blue form with the instruction: "Complete the form with the missing information and you will receive the unlock code within 24 hours". The form contains the following fields: "Your Name", "Your Email", "Company", "Get SerialNumber", and "Get Dairlabit". A "Send" button is located at the bottom right of the form.

10. Cliccare su “Invia”

11. Entro 24 ore riceverai un’email con il Codice di Attivazione. Puoi copiare e incollare il Codice di Attivazione nell’apposito riquadro, ripetendo la procedura iniziale (passaggi da n.1 a n.7)

12. Premere “Attiva”

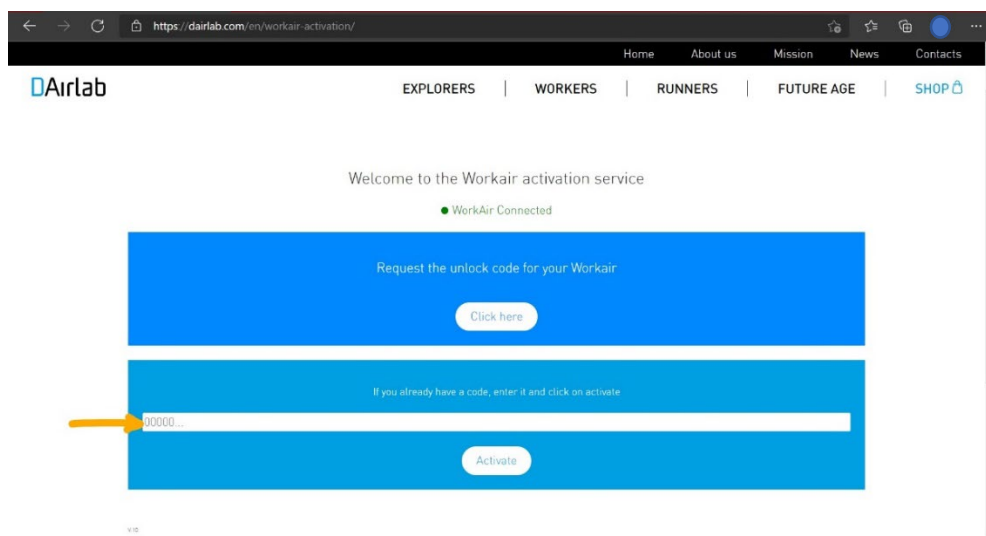

A screenshot of the same Workair activation service page, but with a different layout. The page title is "Welcome to the Workair activation service" and it shows a "WorkAir Connected" status. The main content is a blue form with the instruction: "Request the unlock code for your Workair". Below this is a "Click here" button. The next section is a blue form with the instruction: "If you already have a code, enter it and click on activate". Below this is a text input field containing "00000..." and an "Activate" button. A yellow arrow points to the input field. The page also features a navigation menu with links: Home, About us, Mission, News, Contacts, and a SHOP icon.

13. Ora WorkAir è attivato! Per assicurarsene: scollegare WorkAir dal PC, spegnere WorkAir dal pulsante e riaccenderlo; se WorkAir lampeggia la prima volta di colore blu e poi di colore verde, arancione o rosso (in base allo stato della carica della batteria), vuol dire che è attivato correttamente e pronto all'uso!

Buon lavoro con WorkAir!

Contattaci per ulteriore supporto a:
support@dairlab.com